




QuikRead go[®] HbA1c

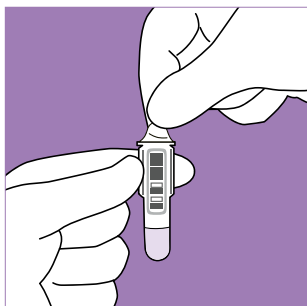


1 Zdejmij z kuwety ochronną folię. Nie dotykaj przezroczystych płaskich powierzchni w dolnej części kuwety.

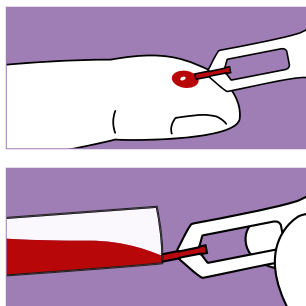


2 Trzymaj narzędzie do pobierania próbek QuikRead go Sample Collector 1µl prawie poziomo tuż pod powierzchnią próbki. Całkowicie napełnij część kapilarną narzędzia do pobierania próbek.

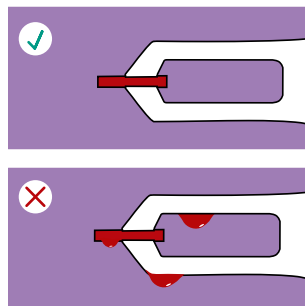


Uwaga! Sprawdź, czy kapilara jest całkowicie napełniona. **Nie wycieraj narzędzia do pobierania próbek!** Jeśli na narzędziu do pobierania próbek znajduje się nadmiar próbki, narzędzie wyrzuć.

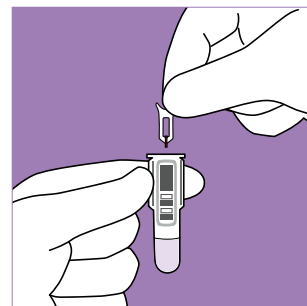

3 Umieść narzędzie w kuwecie w ciągu 1 minuty. Narzędzie nie dotyka roztworu w kuwecie.

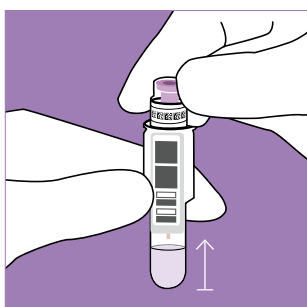

4 Zamknij szczelnie kuwetę wieczkiem z odczynnikami HbA1c. Nie naciskaj na wewnętrzną fioletową część wieczka. Test wykonaj w ciągu 5 minut. **Trzymaj kuwetę w pozycji pionowej i nie wstrząsaj nią.**

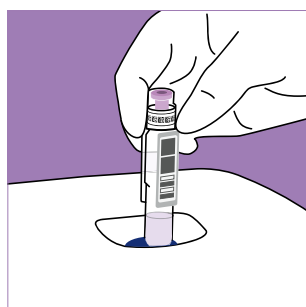

5 Na wyświetlaczu urządzenia QuikRead go wybierz **pomiar**. Umieść kuwetę w studzience pomiarowej urządzenia mając kod kreskowy skierowany ku sobie.



6 Po zakończeniu pomiaru na wyświetlaczu pojawi się wynik a kuweta zostanie automatycznie wysunięta ze studzienki pomiarowej.

Przed wykonaniem testu prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

QuikRead go[®] HbA1c



Zestaw

Zamknięty zestaw w temperaturze 2–8°C: do upływu **daty ważności** zestawu. Zamknięty zestaw w temperaturze 18–25°C: **2 miesiące**



Kuwety

W zamkniętej zewnętrznej folii ochronnej w temperaturze 2–8°C: do upływu **daty ważności** zestawu. Zamknięte kuwety po otwarciu zewnętrznej folii ochronnej: w temperaturze 2–8°C: **6 miesięcy** / w temperaturze 18–25°C: **2 miesiące**



Otwarta kuweta

Przed wykonaniem testu kuwetę należy ogrzać do temperatury 18–25°C. Test należy wykonać w ciągu **1 godziny** od otwarcia kuwety. Próbkę w kuwecie zamkniętej wieczkiem jest stabilna przez **5 minut**.



Tuba zawierająca wieczka z odczynnikami

Zamknięta tuba w temperaturze 2–8°C: do upływu **daty ważności** zestawu. Po pierwszym otwarciu w temperaturze 2–8°C: **6 miesięcy** / w temperaturze 18–25°C: **2 miesiące**



Narzędzia do pobierania próbek

Przechowywanie w temperaturze 2–25°C: do **daty ważności** podanej na opakowaniu z narzędziami do pobierania próbek Sample Collector 1µl



HbA1c Control Set (zestaw kontroli)

Zamknięta folka w temperaturze 2–8°C: do upływu **daty ważności** Po pierwszym otwarciu folka w temperaturze 2–8°C: **50 dni**

Dane kontaktowe

Aidian Oy, Finlandia
Przedstawicielstwo dla CZ, HU, PL, SK
Bělohorská 57, 169 00 Praga 6
Republika Czeska
Tel.: +48 664 382 811
www.aidian.pl / www.quikread.pl

Produkt	Nr kat.
QuikRead go HbA1c oraz QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 testów	151058
QuikRead go HbA1c Control Set (kontrolni materiál)	154520
Urządzenie QuikRead go	135867
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 szt.	154457